

スポアクレンズ レディトゥユース ワイブはシールドエッジ加工を施した、ポリエステル製の織布を使用しています。パッケージ内部には、液体のスポアクレンズ レディトゥユースを封入したパウチが別に組み込まれており、ワイブと薬液が分離された状態で包装されています。この構造により、薬液の化学的安定性を最大限に保ちつつ、使用時に簡単にワイブへ液体を含浸させることが可能です。使用直前にパッケージを丸めることで、内部のパウチが開き、新鮮な薬液が最適な量で素早くワイブ全体に行き渡ります。これにより、無駄を省き、いつでも一貫した品質のワイブを提供できます。本製品で使用している薬液は、モップやスプレーにて使用されるスポアクレンズ レディトゥユースと同一のものであり、最小限の手間にてその薬液を含浸させたワイブが利用できます。また、貴社バリデーションに対応するための各種文書類も取り揃えており、安心してご導入いただけます。



スポアクレンズ レディトゥユース ワイブ

クリーンルームに最適な、シンプルかつ革新的製品


特徴

利点

薬液は殺孢子能力を有するスポアクレンズ レディトゥユースを使用	有効性試験とバリデーションの簡素化
開封後すぐに使用出来る、レディトゥユース仕様	使いやすいパッケージにより、準備する時間と労力を省略 希釈等の薬液準備に関するミスや、準備手順に対するバリデーションを排除
シールドエッジ加工を施した、ポリエステル製の織布を使用	シールドエッジ加工により、発塵を抑えたワイブ
ガンマ滅菌済み二重包装、各ロット USP無菌試験済み	管理区域への導入を簡易化
EU 殺生物性製品規則(BPR)認可	認められた有効性
cGMP準拠の製造環境とロット単位でのトレーサビリティ	品質保証および品質管理の取り組みをサポート

用途

- 表面除菌及び微生物管理対象例：
 - 作業台
 - 安全キャビネット
 - カート及びその他装置類

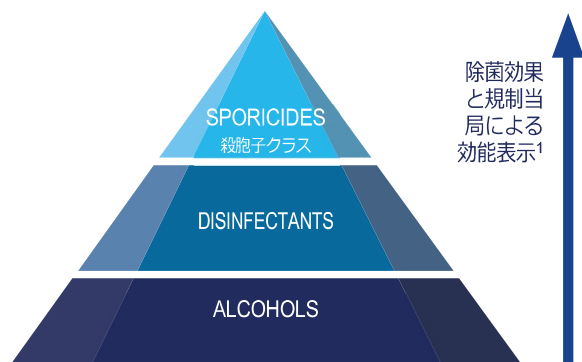

表面除菌剤クラス分け

¹上記ピラミッドの最下層に位置する除菌剤は、最も頻繁に使用されるものですが、殺孢子能力はありません。上層に進むにつれて、より除菌力が強く広範囲に効果を発揮します。

あらゆる微生物管理プログラムにおいて、除菌剤の使用方法は非常に重要であり、慎重に選定する必要があります。またその使用方法は、バリデーションで求められる一貫性や再現性と、作業現場で求められる利便性や効果とのバランスも考慮する必要があります。本製品は、モップがけやスプレーでの対応が難しいエリアにおいても、シンプルな使用方法で高い再現性を実現します。

製品情報

スポアクレンス レディトゥユース ワイプ

クリーンルーム、無菌エリア持ち込み対応ガンマ滅菌済み二重包装使用

説明

品番

- ・入数：12パウチ/箱、15枚/パウチ
- ・ワイプサイズ：22cm x 22 cm
- ・液量：375 mL

653015EC

